

# Кресла гинекологические

## Кресло гинекологическое КГ-6

РУ № ФСР 2007/00070 от 23.11.2015г.



Перейти на сайт



Смотреть видео

Для проведения более качественной санитарной обработки кресла, подушки подголовника и сиденья - быстросъёмные

Для удобства замены рулона одноразовых пелёнок, подушка спинки - откидная

Кресло устанавливается в положение «Тренделенбург»

Два электропривода изменяют угол наклона спинки от  $-15^\circ$  до  $+70^\circ$  и сиденья от  $0^\circ$  до  $+15^\circ$

Подколенники оснащены функцией синхронного раздвижения с жёсткой фиксацией зажимными винтами

Электропривод изменяет высоту сиденья от 650 до 950 мм

Два медицинских колеса позволяют передвинуть кресло

Прочный пластиковый кожух защищает каркас и электроприводы от грязи и повреждений

Мягкие части выполнены из литого пенополиуретана толщиной 60 мм и обтянуты винилискожей


Подколенники регулируются по высоте и углу наклона

Ручной и ножной пульт управления электроприводами


Тазик из нержавеющей стали всегда остаётся в горизонтальном положении при изменении угла наклона сиденья

Четыре опоры, из них две регулируемые для выравнивания кресла на неровном полу

### Технические характеристики

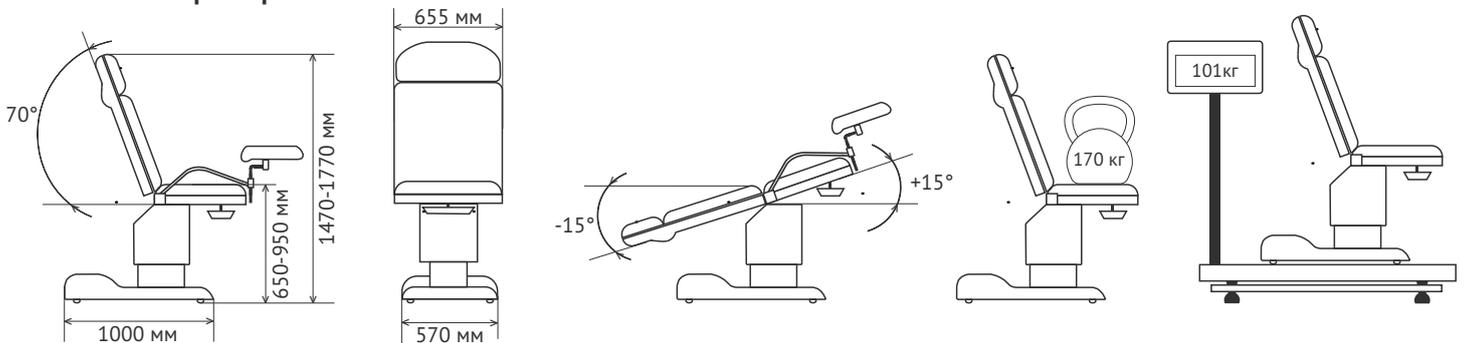


### Габаритные размеры в гофрокартонной упаковке, мм

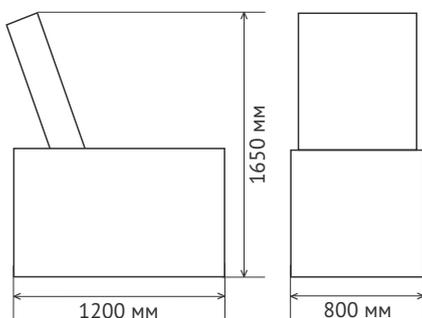

$V = 1,584 \text{ м}^3$

### Габаритные размеры в деревянной обрешётке, мм

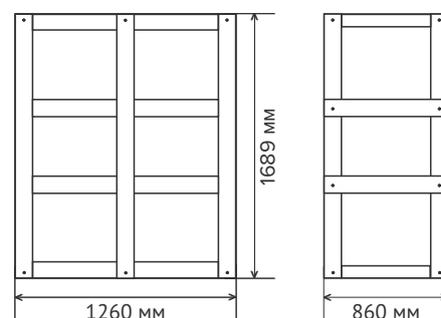

$V = 1,83 \text{ м}^3$